

# IONPA

## UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy az IONICKISS márkát választotta.

Elköteleztük magunkat, hogy olyan rendkívül hatékony termékeket kínáljunk, amelyek elősegítik a fogak tisztítását és védik a szájüreg egészségét. Ez az ionizáló fogkefe hatékonyan csökkenti a lepedékképződést, és eltávolítja a kávé, a tea és a dohányzás okozta elszíneződést. Megvédi az ínyt és fontos szerepet játszik az ínygyulladás megelőzésében.

Az IONPA HOME fogkefe használata teljesen új élményt nyújt a fogmosásban. Használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be ezeket az utasításokat.

### Fontos biztonsági óvintézkedések


1. Ne próbálja erőszakkal felnyitni, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
2. A termék nem ütésálló, ne ejtse le a terméket. Ha a termék sérülnekn tűnik, ne használja.
3. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő ajánlott feszültségének.
4. Ezt a terméket csak az eredeti IONICKISS fejjel és töltővel használja.
5. Ha korábban száj- vagy ínyműtéten esett át, használat előtt kérjük, konzultáljon fogorvosával.
6. Az IONICKISS fogkefék használata mindenki számára biztonságos. Ha szívritmus-szabályozót vagy hasonló eszközt használ, kérjük, konzultáljon orvosával, mielőtt a fogkefét használni kezdené.
7. Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására szolgál.
8. A terméket gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha őket a készülék biztonságos használatára megtanították, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
9. Ne használja a töltőt szabadban vagy magas hőmérsékleten. Ne merítse a fogkefét vagy a töltőt vízbe vagy más folyadékba. Ha nem használja vagy tisztítja, áramtalanítsa. Kérjük, ne tisztítsa hajápolási termékekkel (mint például gélek vagy olajok), szappannal vagy savas tisztítószerrel. Ez károsíthatja a termék felületét.
10. Gyermekeknek felügyelet alatt ajánlott használni a terméket a megfelelő kezelés biztosítása érdekében.
11. Ne tárolja napsütésben és / vagy magas hőmérsékleten.



## 1 Tartozékok

### Termék információ

|                                                          |                                                                                                |                       |                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                                              | Ionizáló - szónikus fogkefe                                                                    | Modell                | DP-111                                |
| Teljesítmény (fogkefe)                                   | 1.2 W                                                                                          | Feszültség (fogkefe)  | DC 3.7 V                              |
| Energiafogyasztás (fogkefe)                              | 1.5 W                                                                                          | Feszültség (töltő)    | 5 V                                   |
| A feltöltéshez szükséges idő                             | Körülbelül 4 óra                                                                               | Akkumulátor kapacitás | 260 mAh                               |
| Működési szabvány                                        | GB4706.59-2008                                                                                 | Eredet                | Japan                                 |
| Az akkumulátor használata teljesen feltöltött állapotban | 100 perc                                                                                       | Súly                  | Hozzávetőlegesen (fejgel együtt) 85 g |
| Fogantyú mérete                                          | Körülbelül 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm                                                        |                       |                                       |
| Frekvencia                                               | Körülbelül 22 000 rezgés / perc. (Clean mód)<br>Körülbelül 26 000 rezgés / perc. (White + mód) |                       |                                       |

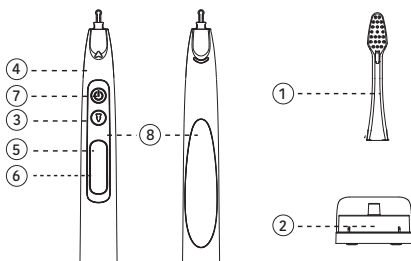

- |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ① Fogkefefej                            | ⑤ A tisztítási mód kijelzője     |
| ② Töltőállomás                          | ⑥ Tápfeszültséget jelző LED fény |
| ③ Gomb a tisztítási mód kiválasztásához | ⑦ Be és / Kikapcsológomb         |
| ④ Fogantyú                              | ⑧ Fém érintkező felület          |


## 2 Az IONPA HOME használata

1. Helyezze a pótfetet a kefefej acélrúdjaára
2. Nedves kézzel tartsa a fogantyút a fém heveder helyén. Ezáltal elindítja a negatív ionok áramlását, amelynek köszönhetően az IONPA HOME sonic brush még hatékonyabban működik.
3. Nedvesítse meg a fogkefe sörtéit, és ha szükséges, vigyen fel kis mennyiségű fogkrémet. (Ha fogkrémet használ, akkor a szokásos mennyiség fele elegendő.)
4. Helyezze a fogkefe sörtéit enye szögben az íny vonalához.
5. Válassza ki a megfelelő módot a módválasztó gomb megnyomásával. A kijelzőpanelen megjelenik a kiválasztott mód. Négy mód közül választhat az alábbiak szerint:
  - a. Clean: kb. 22 000 rezgés percenként. A napi tisztítás módja, amelyel tökéletesen tisztán tartja a szájüreget
  - b. White +: kb. 26 000 rezgés percenként. A fogak felületi feljavítás elvégzésére szolgáló mód.
  - c. Gumcare: A fogmosás mellett ez a program kíméletes ny masszázst is biztosít.
  - d. HiClean: Ez az üzemmód valamivel erőteljesebb, hogy hozzáférjen a fogközhöz.
6. Lassan mozgassa a fogkefe fejt a fogak fölé és vissza. Váltakozva tisztítsa a fogak elülső, hátsó és rágófelületeit, miközben legalább 10 másodpercet szentel minden felületre. Győződjön meg arról, hogy a sörték a fogak közé nyúlnak, és finoman masszírozza az ínyt. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a sörtékre, a munka nagy részét a fej szonikus mozgása fogja elvégezni.

### Fejcsere jelző

Ha úgy dönt, hogy nem használja a fejcsere jelzőt:

A fejcsere jelző gyárilag aktív. Ha úgy dönt, hogy nem használja az indikátort, akkor először győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, majd 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomja meg a multifunkciós gombot az indikátor kikapcsolásához.

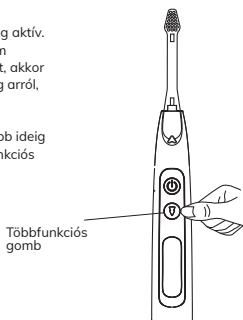


### A fejcsere jelzőjének visszaállítása:

(a kefefej ikon eltűnik)

Ha a jelző be van kapcsolva, a kefefej ikon 180 perc használat után megjelenik. Az ikon 30 másodpercig villog még a készülék kikapcsolása után is.

A visszaállításához kapcsolja ki a készüléket, és 2 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot és a multifunkciós gombot. A kijelző nem állítható vissza, ha egyszerűen kicseréli a kefefejt.

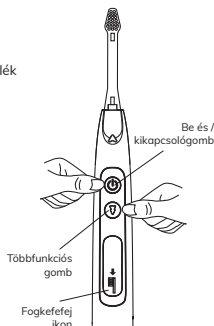

## 3 Tulajdonságok

1. Az IONPA HOME kefe motorja percenként 26 000 rezgést biztosít 6 mm-es amplitúdóval (területi lefedettséggel) a hatékony fogtisztítás érdekében.
2. A fogkefe teste ergonomikus, puha felületű, a könnyű és kényelmes fogás érdekében.
- 2a. A kefeestet vízálló.
3. Az intelligens időzítő 30 másodpercenként, az ajánlott két perc alatt összesen háromszor szünetel, hogy emlékeztesse a felhasználót a szájüreg minden szektorának ajánlott tisztítási idejére.
4. A fogkefe egy méter mélységig legfeljebb 30 percig vízbe merülhet, a termék károsodása nélkül. Ezért a mindennapi tisztításhoz a termék tökéletesen megfelel a vízállósági paraméternek.
5. A termék biztonságos és tartós lítium elemet tartalmaz. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 25 napig is kitart (használat 2 percig, naponta kétszer), az alacsony töltöttségre figyelmezteti a felhasználót.
6. 4 tisztítási módot kínál - "Clean", "White +", "Gumcare" és "HiClean" a fogak és / vagy az íny különböző szintű tisztításához.

A termék funkcióit gyárilag előre beállították és a forgalmazás előtt ellenőrizték.

## 4 Fogkefe fej cseréje




Fejcsere:

Forgassa a fejet 90 fokkal a bal oldali ábra szerint, majd csúsztassa ki a fogantyúból.

### Megjegyzés:

Csúsztassa a fejet a fémrúdra, amíg kattan.

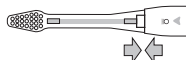

## 5 A termék töltése

1. Az induktív töltésnek köszönhetően elég, ha a fogkefét egy elektromos áramra kapcsolt töltőalapra helyezi.
2. A LED fény jelzi, hogy az egység tölt. Miután a fogkefe teljesen feltöltődött, ez a fény kialszik. Az egész folyamat legfeljebb négy órát vehet igénybe.

Az üzemmódválasztó gomb töltés közben kikapcsol.

Ha az aktív terméket a töltőállványra helyezi, akkor az kikapcsol és töltési módra vált.

## 6 A termék tisztítása

1. **Fogantyú**  
Vegye le a kefefejet a fogantyúról. Puha, nedves ruhával törölje le a fogantyút és a tengely teljes felületét, majd hagyja megszáradni.
2. **Töltőállvány**  
Tisztítsa meg puha, nedves ruhával és hagyja megszáradni.
  - Ne merítse vízbe.
3. **Kefefej**
  - Minden használat után alaposan öblítse le a fejet.
  - A sörték károsodásának elkerülése érdekében ne nyomja össze és ne próbálja kihúzni őket.
  - A fogkefefej cseréjét 2 havonta javasoljuk. A túlságosan használt fejek felhalmozhatják a baktériumokat, és tisztítási hatékonyságuk az idő múlásával csökken.

30 napos használat után a fejcsere jelzőfény kigyullad. Ez a jelzőfény csak tájékoztató jellegű, és előre jelez, hogy elegendő idő legyen egy új fej beszerzésére.